


# WECHSELDRUCKSYSTEME

# **Dekubitus Grad I und II**



## WECHSELDRUCKSYSTEME DEKUBITUS GRAD I - II

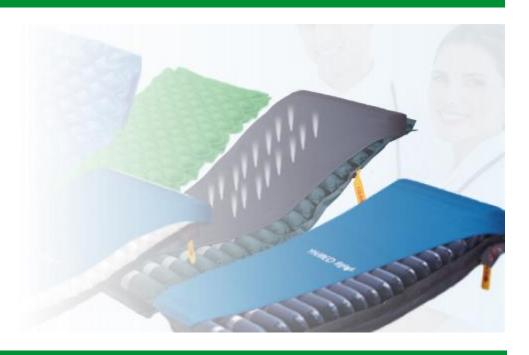

#### Wir bieten an

Wir bieten Ihnen ein komplettes Sortiment an hochwertigen Wechseldruck-Systemen zur Dekubitus-Prophylaxe und Therapie.

Durch das Einsinken des Patienten (Druckverteilung) und dem wechselnden Druck in den Luftzellen (Druckverlagerung) ist das System je nach Zellenhöhe und innovativem Steuergerät zur Therapie bis Dekubitus Grad II geeignet.

Wechseldruck deshalb, weil die Luftzellen wechselweise belüftet oder entlüftet werden. D.h. durch diesen Rhythmus kommt es zur regelmäßigen Druckentlastung an der Auflagefläche.

Druckentlastung heißt für diesen Körperbereich die Möglichkeit einer besseren Durchblutung.

Die Handhabung ist sehr einfach. Vorweg wird das Körpergewicht des Patienten per Drehknopf oder bei digitalen Steuergeräten, direkt per Knopfdruck eingestellt. Über einen An- wie Aus-Schalter lässt sich die Anti-Dekubitus-Matratze in Betrieb nehmen oder ausschalten.

Mit steigendem Dekubitus Grad werden Matratzen mit höheren Zellen eingesetzt.

Für Arbeiten am Patienten kann auf statischen Druck umgeschaltet werden (alle Kammern gefüllt), für Notfälle (Reanimation, CPR) kann die gesamte Luft sehr schnell aus der Matratze entfernt werden. Einige der Matratzen können auch bei Stromausfall den Druck in den Kammern konstant halten.

Der Matratzenüberzug ist feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv und waschbar und schwer entflammbar!

Wechseldrucksysteme	
bis Dekubitus Grad I	movocare adm one
bis Dekubitus Grad II	movocare adm light

www.movox.at 2

## WECHSELDRUCKSYSTEME DEKUBITUS GRAD I - II



# movocare adm one (Dekubitus Grad I)

Die adm one ist ein Wechseldrucksystem, das aus einer Matratzenauflage mit 130 Luftpölster und einem benutzerfreundlichen Steuergerät besteht. Diese kostengünstigste Variante findet in der häuslichen Pflege sowie in Pflegeheimen starkes Interesse und wird in frühem Stadium I/II eingesetzt-

Die Matratzenauflage entlastet den Druck durch sequentielles Entleeren und Aufblasen der Luftpölster in Intervallen von ca. 6 Minuten.

Matratzenauflage: 200cm x 90cm x 7cm Verlängerungslaschen: 50cm für beide Seiten

Belastbarkeit

Patientengewicht: von 40 bis max. 135kg



Über Krankenkasse verrechenbar

Alle Preise inklusive 20% MWSt. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der movox gmbh auf www.movox.at.

Bestellungen bitte per E-Mail an vertrieb@movox.at

# movocare adm light (Dekubitus Grad II)

Die adm light ist ein Wechseldrucksystem, bestehend aus einer Matratze mit 24 Luftzellen, einem atmungsaktiven Bezug und einem bedienerfreundlichen Steuergerät.

Durch das Einsinken des Patienten (Druckverteilung) und wechselnden Druck in den Luftzellen (Druckverlagerung) ist das System zur Therapie bis Dekubitus Grad II geeignet.

Der Statikmodus wird bei Schmerz- oder schmerzempfindlichen Patienten verwendet.

Wechselzyklus: 12 Min.

Modus Wechseldruck (1 in 2) + statisch

Matratzenauflage: 200cm x 86cm x 7,5cm Material (Bezug): Nylon + PU-beschichtet

Zellenmaterial: Nvlon + PVC

Anzahl Zellen: 24
Materialdicke: 0,34mm
Mikroperforiert: 8 Zonen

Belastbarkeit

Patientengewicht: von 40 bis max. 135kg











Über Krankenkasse verrechenbar

Alle Preise inklusive 20% MWSt. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der movox gmbh auf www.movox.at.

Bestellungen bitte per E-Mail an vertrieb@movox.at

www.movox.at 3